

{SIX PACK} SADA

1. Jak zařízení funguje?

{Six Pack} sada využívá nízký elektrický proud ke kontrakci svalů a poskytuje jemnou masáž nebo účinně posiluje svaly:

- Uvolňuje svaly na ramenou, na zádech a v pase
- Zlepší svalové napětí
- Poskytne masáž

2. Specifikace:

Napětí:	Alkalická baterie 1,5V AAA x 2EA
Provozní režimy:	A-F (6 režimů)
Frekvence:	1 ~ 100 Hz
Trvání programu:	12 minut
Výstup:	Max. 9,8 mA
Velikost:	21x10x2,3 cm
Hmotnost:	57,4 g

3. Vlastnosti produktu:

3.1. Nízkofrekvenční terapie

Pomocí elektrické energie vytváří přístroj nízkofrekvenční puls, který má pozitivní vliv na tělo. Nastavte jeho intenzitu podle vašich představ. Nízká frekvence má jemný, masážní účinek na tělo.

3.2. Můžete si vybrat z 6 programů

3.2.1. Jednoduše vyberte ze 6 režimů

3.2.2. Program se po 12 minutách automaticky vypne

4. Jak přístroj používat




ON/INC: zapnout / zvýšit intenzitu

OFF/DEC: vypnout / snížit intenzitu

PROGRAM: přepínání mezi programy

Indikátory provozního režimu:

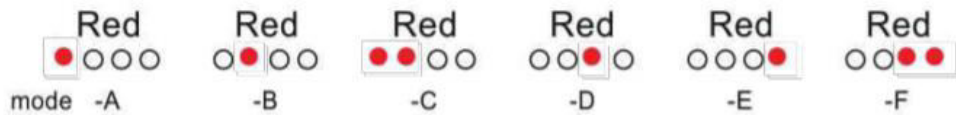

Stisknete-li tlačítko „zapnout / zvýšit intenzitu“, rozsvítí se kontrolka a naopak, když stisknete tlačítko „vypnout / snížit intenzitu“, kontrolka zhasne.

- Obě tlačítka mají 10 úrovní
- Přepínání mezi programy: vyberte z 6 režimů (A~F)
- Až je baterie prázdná, sundejte kryt z prostoru pro baterii a vyměňte ji, poté kryt znovu namontujte zpět.

5. Jak používat {Six pack} sada

- Vždy používejte na čistou a suchou pokožku
- Odstraňte ochranný film z gelových polštářků
- Umístěte přístroj na požadovanou část těla (břicho, nohy, ramena atd.)

! NEZAPÍNAJTE ZAŘÍZENÍ PŘED NASAZENÍM NA TĚLO.

! NEDOTÝKEJTE SE LEPKAVÉHO POVRCHU, ABYSTE TAK NESNÍŽOVALI ŽIVOTNOST GELOVÝCH POLŠTÁŘKŮ.

6. První použití

- Vyměňte přístroj z krabice
- Umístěte přístroj na požadovanou část těla
- Vyberte požadovaný program
- Nastavte intenzitu
- Doba trvání programu je 12 minut
- Opakovaně stiskněte tlačítko pro vypnutí, dokud kontrolka nezhasne

Přístroj je vhodný používat naráz po dobu až 12 minut, a to 2-3krát denně. Pokud ho používáte déle, můžete pocítit únavu.

Nepoužívejte přístroj 30 minut po jídle; Nejlepší je použít jej po sprchování na čistou a suchou pokožku

7. Údržba

- Po použití přístroj vypněte.
- Na gelové polštářky položte ochranný film, aby zůstaly nadále lepkavé a čisté.
- Nečistoty čistěte vlhkým hadříkem a šetrným čisticím prostředkem.
- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu, teple, vlhkosti, ohni, elektřině atd.

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii z regulátoru.

8. Výměna baterie

- Otevřete kryt prostoru pro baterie
- Správně vložte baterii (pozor na + a -)
- Znovu nainstalujte kryt
- Zapněte přístroj a zkontrolujte, zda funguje

SHRNUTÍ:



1. Otevřete prostoru pro baterie



2. Vložte baterie (2xAAA)



3. Připojte regulátor k jednotce



4. Odstraňte ochranný film



5. Připojte regulátor k jednotce



6. Nasadte pás na paži / nohu