

CUPPY - KÖPÖLYÖZŐ



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta.



Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el az itt található utasításokat és őrizze meg az útmutatót.

A CSOMAG TARTALMA:

TECHNIKAI ADATOK:

Töltési feszültség: DC 5 V

Üzemi feszültség: 3.7 V

Energiaellátás: 8W

Tulajdonságok

■ Vákuumkezelés

- A.) Kiszívja az olajat a bőrszövetből.
- B.) Fokozza a nyirokműködést és a vérkeringést.
- C.) Eltávolítja a nyirokkeringésből a toxinokat.
- D.) Karcoló hatás.

■ Hőenergia

- A.) Fokozza a kérgi kollagéntermelést.
- B.) A folyamatos hő ellazítja a szellemet és segít megszabadulni a stressztől.

■ Mágneses hullámterápia

- A.) Segít a duzzanatok enyhítésében, megszünteti a duzzanatot és a fájdalmat.
- B.) Megszünteti a fáradtságot, segíti a fizikai regenerálódást.

FIGYELEM

1. Sérült bőrön ne használja.
2. Ne használja terhesség vagy menstruáció alatt.
3. Ne használja közvetlenül étkezés után.
4. Ne tegye ki a kezelt bőrfelületet például víznek, testápolónak, szappannak, napfénynek,...
5. Használat közben kövesse az utasításokat.
6. A bőr állapotától függően maximum naponta használja.
7. Ne hagyja ugyanazon a helyen több mint 1 percig. Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, hagyja abba a kezelést.
8. Allergiában szenvedők, terhes nők, szívinfarktusos betegek, kóros vérnyomásban, rosszindulatú daganatban, agyi érbetegségben szenvedők és idegen tárgyat viselő személyek kerüljék a termék használatát.

MEGJEGYZÉS: A készülék forró felülettel rendelkezik. Használatakor körültekintően kell eljárni.

RÉSZEI:


- 1 Bekapcsológomb
- 2 Fűtés gomb
- 3 Vákuum gomb
- 4 LCD kijelző
- 5 Időzítés gomb



HASZNÁLATA

Megjegyzés:

★ A készülék használata előtt a szűrőpamutot a szűrődugóba kell helyezni (1. ábra), majd a szűrődugót a készülék szívónyílásába kell helyezni (2. ábra). Hatékonyan blokkolja az illóolajak vagy a masszázstermékek készülékbe jutását. Hatékonyan meghosszabbítja a készülék élettartamát. (A szűrőpamutot minden használat után cserélje ki, a szűrőpamut levegőn szárítható és újra felhasználható).

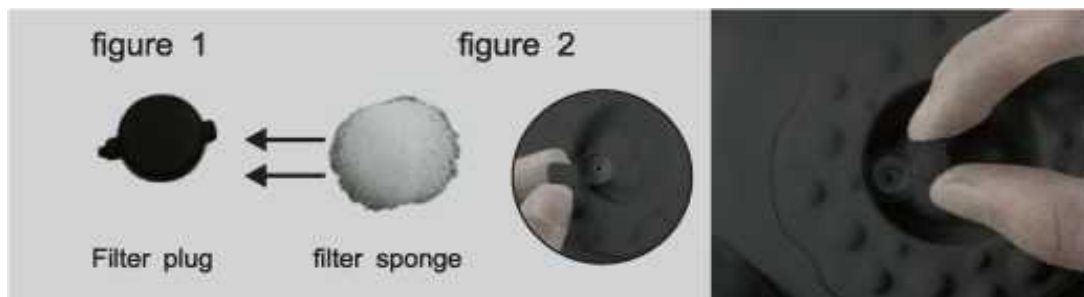

1. A bőr megtisztítása után vigyen fel egy kis mennyiségű illóolajat.
2. Először töltsse fel teljesen a készüléket.
3. Nyomja meg a bekapcsológombot, és az égője világítani kezd. Ekkor az igényei szerint beállíthatja a „heat” (melegítés) és a „negative pressure” (vákuum) funkciókat.

4. Nyomja meg a „heat” (melegítés) gombot, a hőmérséklet 1-9 szinten történő beállításához, minél nagyobbra állítja, annál magasabb a hőmérséklet.
5. Nyomja meg a „negative pressure” (vákuum) gombot, az 1-9 terjedő skálán történő beállításához. Minél nagyobbra állítja az értéket, annál nagyobb lesz a vákuum.
6. A műszer használata után nyomja meg a középső kapcsológombot a műszer kikapcsolásához, tisztítsa meg és tárolja száraz helyen.

Megjegyzés: Az alapértelmezett működési ideje 20 perc, a gép automatikusan kikapcsol 20 perc után. Ez meghosszabbítja a készülék élettartamát.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése és az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében gondoskodjon a termék felelősségteljes újrahasznosításáról. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

Forgalmazza: HS Plus d.o.o
Kína

Származási ország: