

# EMS MASSÍROZÓ FOOTPAD



## Műszaki leírás:

Termék neve	EMS lábmasszírozó
Feszültség	Alkáli elem 1,5 V, 2x AAA
Módok	6 (A-F)
Frekvencia	1-100 Hz
Kimenet	8 mA
Méret	32x29 cm
Súly	57,4 g

## A csomag tartalma:

Main Device(FRONT)



Main Device(REAR)



Foot Mat



### Including:

1\* Main Device  
1\* User Manual

1\* Foot Mat  
2\* AAA Batteries(Selection)

Főkészülék (ELEJE)

Főkészülék (HÁTULJA)

Talpszőnyeg
A csomag tartalma:
1* Fő eszköz
1 * Használati útmutató
1* Talpszőnyeg
AAA elem nem a csomag része

A készülék 12 perc használat után automatikusan kikapcsol.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha teszi a lábát a betétre.

### **Figyelmeztetések:**

A termék nem használható nem diagnosztizált fájdalom enyhítésére, nem orvosi eszköz. Bármilyen fájdalommal járó állapot kezelése előtt kérjük, konzultáljon orvosával.

A túlságos stimuláció elkerülése érdekében használjon alacsony intenzitást és rövidebb használati időtartamot.

Gyermekek és állatok elől elzárva tartandó.

A termék nem vízálló, ne merítse víz alá, és ne érintkezzen vízzel.

Ne használja a termékeket, ha egészségügyi problémával küzd a lábával, vagy ha sebes ez a terület.

Csak rendeltetésszerű használatra.

Csak a termékhez mellékelt tartozékokat használja.

Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában.

Ne hagyja, hogy a készülék bármilyen fémmel, például ékszerekkel érintkezzen.

Ne használja a készüléket más testrészeken, illetve kifejezetten olyan testrészeken, amelyeken tetoválás, műanyag vagy fém implantátum van, beleértve az arcot, a mellkast, a gerincet és a vállakat is.

Ne használj pacemakerrel vagy beépített defibrilátorral, mélyvénás trombózissal vagy magas vérnyomással, illetve ha terhes vagy szívbeteg.

## Használata:




Csúsztassa le az akkumulátor fedelét a készülékről
Helyezzen be 2 db AAA elemet
Csatlakoztassa a főkészüléket a talpszőnyeghez
Tegye a lábát a szőnyegre (mezítláb kell lennie))
Nyomja meg az "ON/INC" gombot a bekapcsoláshoz
Nyomja meg a "Program" gombot a program kiválasztásához
Nyomja meg az "ON/INC" gombot az intenzitás növeléséhez vagy az "OFF/DEC" gombot az intenzitás csökkentéséhez
Pihenjen és lazítson

## Módok:



### Lamp for mode indication

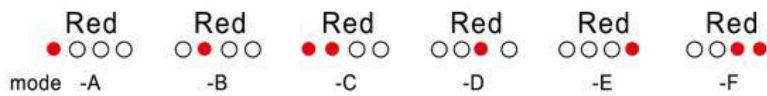

ON: Bekapcsolás
OFF: Kikapcsolás
INC: Növelés
DEC: Csökkentés
PROGRAM: Módváltás
Üzemmódjelző lámpák
Piros
mód

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.